

アクアヴィーナス V-2800

Lymphdrainage & Detox



リンパに及ぶ深いリラクゼーションと健康美。

アクアヴィーナス V-2800は人体振動理論がエビデンスの、水圧振動刺激による全身型のウォーター・リラクゼーションベッドです。

やわらかく、しかも力強いサイクロン水流による振動刺激は、深くインナーマッスルに至り、リンパドレナージュ&デドックス作用と、深いリラクゼーションによる健康美を促します。

衰えることのない健康と美を求めるご高齢世代にも、体液の循環を促し、深く快適なリラクゼーションを実感いただけます。

Relaxation Hood

こころよいプライベート空間を演出。専用フード（オプション）

V-2800には頭部を覆う専用フードを用意しました。リラクゼーションを妨げる周囲の雑踏から離れ、プライベート空間へと誘います。

Cyclonic Power
サイクロン水流

搭載スクリーンノズル D型 6基 T型 2基

Aqua Venus
Aqua Relaxation Table

独立機能のスクリーンノズル 3タイプ5種類



頸肩甲部 水圧振動数 3~10Hz (叩打・揉捏)



腰臀部 水圧振動数 5~9Hz (指圧・揉捏)



下腿部 水圧振動数 6~14Hz (指圧・振せん)

頸肩や腰など、部位ごとの深いリラクゼーション

サイクロン水流を発生するスクリーンノズルは、頸肩や腰部など、部位ごとにカバーする独立した専用のノズルが8基。個々のノズルが移動することなく、「船酔い現象」の原因となる不快な縦方向の波の発生を防ぎます。

抹消に及ぶリンパドレナージュ&デドックス作用


サイクロン水流による水圧振動は、全身を巡るリンパのネットワークに直接働きかけ、体内の老廃物を速やかに排泄させる（リンパドレナージュ&デドックス作用）が期待されます。特に高齢のご利用者では、今迄に無い快適なリラクゼーションを実感いただけます。

〈人体振動理論〉が証明。こころよい大深度のリラクゼーション

水圧振動の刺激周波数は人体固有の振動リズムである上半身 3 ~ 6Hz、下半身 10 ~ 15Hz。V-2800 のサイクロン水流は、これら人体固有の振動周波数と一致して、こころよい振動刺激と、深いリラクゼーションを及ぼします。しかも、その効果は人体に比較的に長い時間留まる、という特長があります。

〈人体振動理論〉……

仰臥した人体の各部位には、安静時に固有の振動数があり（安静時・暗振動のグラフ参照）部位ごとの知覚する振動知覚特性や振動知覚閾値が存在します。また振動時の伝達過程においては固有の共振周波数が存在しますので、部位ごとにも固有の共振と増幅を示す、といわれています。

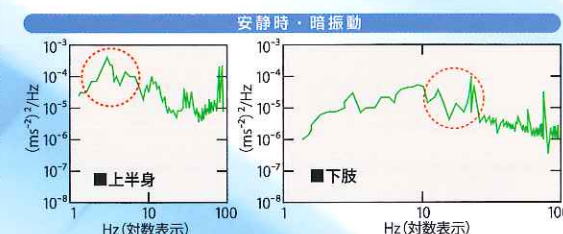

人体各部位への振動伝達特性を実証

下肢と上半身からの入力振動と人体各部位の振動伝達を明らかにするため、部位での測定実験を行い実証された。

[振動計測器：IMV社製VP-7002]



Sound Unit

専用サウンドユニット（オプション）



Aqua Venus

Aqua Relaxation Table

Lymphdrainage & Detox V-2800

25%
節電
節電機能搭載



アクアヴィーナス V-2800
操作リモコン

アクアヴィーナス V-2800 プログラム例

1 全身 I (標準)	2 全身 II (強刺激)	3 全身 III (柔らか刺激)	4 腰・下肢	5 首・肩周辺	6 左右バランス	7 腰・背部	8 リンパドレナージュ
●ステップ	●ステップ	●ステップ	●ステップ	●ステップ	●ステップ	●ステップ	●ステップ
●モード	●モード	●モード	●モード	●モード	●モード	●モード	●モード
●ノズル移行方向	●ノズル移行方向	●ノズル移行方向	●ノズル移行方向	●ノズル移行方向	●ノズル移行方向	●ノズル移行方向	●ノズル移行方向
1 全身 I (標準)	1 全身 II (強刺激)	1 全身 III (柔らか刺激)	1 腰・下肢	1 首・肩周辺	1 左右バランス	1 腰・背部	1 リンパドレナージュ
2 全身 I (標準)	2 全身 II (強刺激)	2 全身 III (柔らか刺激)	2 腰・下肢	2 首・肩周辺	2 左右バランス	2 腰・背部	2 リンパドレナージュ
3 全身 I (標準)	3 全身 II (強刺激)	3 全身 III (柔らか刺激)	3 腰・下肢	3 首・肩周辺	3 左右バランス	3 腰・背部	3 リンパドレナージュ
4 全身 I (標準)	4 全身 II (強刺激)	4 全身 III (柔らか刺激)	4 腰・下肢	4 首・肩周辺	4 左右バランス	4 腰・背部	4 リンパドレナージュ
5 全身 I (標準)	5 全身 II (強刺激)	5 全身 III (柔らか刺激)	5 腰・下肢	5 首・肩周辺	5 左右バランス	5 腰・背部	5 リンパドレナージュ
6 全身 I (標準)	6 全身 II (強刺激)	6 全身 III (柔らか刺激)	6 腰・下肢	6 首・肩周辺	6 左右バランス	6 腰・背部	6 リンパドレナージュ
7 全身 I (標準)	7 全身 II (強刺激)	7 全身 III (柔らか刺激)	7 腰・下肢	7 首・肩周辺	7 左右バランス	7 腰・背部	7 リンパドレナージュ
8 全身 I (標準)	8 全身 II (強刺激)	8 全身 III (柔らか刺激)	8 腰・下肢	8 首・肩周辺	8 左右バランス	8 腰・背部	8 リンパドレナージュ
9 全身 I (標準)	9 全身 II (強刺激)	9 全身 III (柔らか刺激)	9 腰・下肢	9 首・肩周辺	9 左右バランス	9 腰・背部	9 リンパドレナージュ
10 全身 I (標準)	10 全身 II (強刺激)	10 全身 III (柔らか刺激)	10 腰・下肢	10 首・肩周辺	10 左右バランス	10 腰・背部	10 リンパドレナージュ
11 全身 I (標準)	11 全身 II (強刺激)	11 全身 III (柔らか刺激)	11 腰・下肢	11 首・肩周辺	11 左右バランス	11 腰・背部	11 リンパドレナージュ
12 全身 I (標準)	12 全身 II (強刺激)	12 全身 III (柔らか刺激)	12 腰・下肢	12 首・肩周辺	12 左右バランス	12 腰・背部	12 リンパドレナージュ
13 全身 I (標準)	13 全身 II (強刺激)	13 全身 III (柔らか刺激)	13 腰・下肢	13 首・肩周辺	13 左右バランス	13 腰・背部	13 リンパドレナージュ
14 全身 I (標準)	14 全身 II (強刺激)	14 全身 III (柔らか刺激)	14 腰・下肢	14 首・肩周辺	14 左右バランス	14 腰・背部	14 リンパドレナージュ
15 全身 I (標準)	15 全身 II (強刺激)	15 全身 III (柔らか刺激)	15 腰・下肢	15 首・肩周辺	15 左右バランス	15 腰・背部	15 リンパドレナージュ
16 全身 I (標準)	16 全身 II (強刺激)	16 全身 III (柔らか刺激)	16 腰・下肢	16 首・肩周辺	16 左右バランス	16 腰・背部	16 リンパドレナージュ

アクアヴィーナス (エコへの挑戦と実証)

●積算電力測定と電気料金 (V-2500で実測)
測定機器: 横河電機 WT210 760401-M/C2

① 使用条件: プログラムNo.1 (強さ5)
② 稼働日数 (1ヶ月): 22日
③ 新電力料金目安単価: 22円/kWh (税込) ※1
④ 使用時間: 11分
⑤ 稼働日数使用電力量 (1ヶ月): 107.254kWh
⑥ 使用人数 (1日): 32人
※1: 電力料金単価は地域により変動します

電気料金の目安 (1ヶ月): 2,360円

※電気料金の目安は稼働時の電気を計算しており、待機状態の電気料金は含まれません。

25% 節電モード (V-2800には25%節電機能が搭載)
電気料金の目安 (1ヶ月): 1,770円

1 省電力+スクリュースノズル
消費電力1100w
※専用のコンセント工事が必要です (1.8 kVA)
電源100V・消費電力1100W+スクリュースノズル (3タイプ5種類) のパワフルな水圧振動刺激。消費電力1100W電気代が割安な単相100V電源。

2 軽量化
注水時の本体重量 250kg
水道水を使用して注水量は約110ℓ (注水時重量: 約250kg)、特別な床補強が不要の軽量化設計。

3 省スペース
540mm
730mm
壁きわでも設置可能なコンパクト & 静音設計。メンテナンスのためのスペースもありません。

●水質維持には専用コンディショナーを1年に1回入れるだけ、水交換の必要はありません。

アクアヴィーナス V-2800 仕様 ※本機は医療機器ではありません。

定格電圧	AC100V 50/60Hz
消費電力	1100W
安全装置	水温過熱防止装置
外形寸法	2120 (W) × 730 (D) × 595 (H) mm 乗込み部の高さ: 540 (H) mm
使用水	水道水

PS 電気用品安全法適合

注水量	約110リットル
本体重量	140kg (注水時: 約250kg)
タイマー	1~99分 (1分毎設定のデジタルタイマー)
刺激タイプ	水流刺激、水圧振動刺激
プログラム	8種類
水温設定	20~40℃

標準付属品 砂袋/コンディショナー/トレー 他

オプション 専用フード/サウンドユニット/コイタイマー/サイドレール/リモコンスタンド/オペレーションライト

NEW series OSHIMA MEDICAL INDUSTRIES CO., LTD.

ウォーターベッド型リラクゼーション器
アクアヴィーナス

Aqua Venus

Aqua Relaxation Table

25% 節電
節電機能搭載



Lymphdrainage & Detox V-2800



水圧振動刺激

検索

<http://www.ooshima.me>

安全に関するご注意

●ご使用前に必ず「取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
●定期的に機器の点検を行ってください。

※仕様及び寸法等は変更する場合がありますのであらかじめご了承ください。

■発売元

理学療法機器

株式会社 大島製作所

本社 〒132-0031 東京都江戸川区松島1-21-7 ☎03 (3654) 7205

関西営業所 〒578-0965 東大阪市本庄西3-7-38 ☎06 (6744) 0348

名古屋営業所 〒451-0054 名古屋市中区南堀越1-18-15 ☎052 (521) 2310

福岡営業所 〒812-0881 福岡市博多区井田2-2-5 ☎092 (592) 3191

■製造元: 平和電子工業株式会社

TECHNOLOGY OMI FOR HUMAN